

# KRUIKENMOEDERS

huisman<sup>medisch</sup>



- **Kruikenmoeders**
- **Koffer-kruikenmoeders**
- **Bedkruiken**



*Kruikenmoeder met opbergruimte*

De kruikenmoeders zijn vanzelfsprekend solide en uiterst veilig. De binnenketel is gemaakt van roodkoper, terwijl de buitenbeplating geheel uit roestvrijstaal bestaat. De verwarming geschiedt door een elektrisch dompel-element, de temperatuur wordt thermostatisch geregeld. Standaard voorzien van een droogkookbeveiliging. Op het front van de binnenketel is een peilglas aangebracht waarop het waterniveau is af te lezen. Bijvullen geschiedt door een vulopening op het ketel-front. Kruikenmoeders zijn leverbaar in vrijstaande-, hangende-of inbouwuitvoering.




*Kruikenmoeder zonder opbergruimte*



*Koffer-kruikenmoeder*

## **Koffer-kruikenmoeder**

Huisman Medisch levert tevens een koffer-kruikenmoeder. Deze kleine handzame kruikenmoeder biedt plaats aan twee kruiken en is met name bedoeld voor de thuis-zorg.

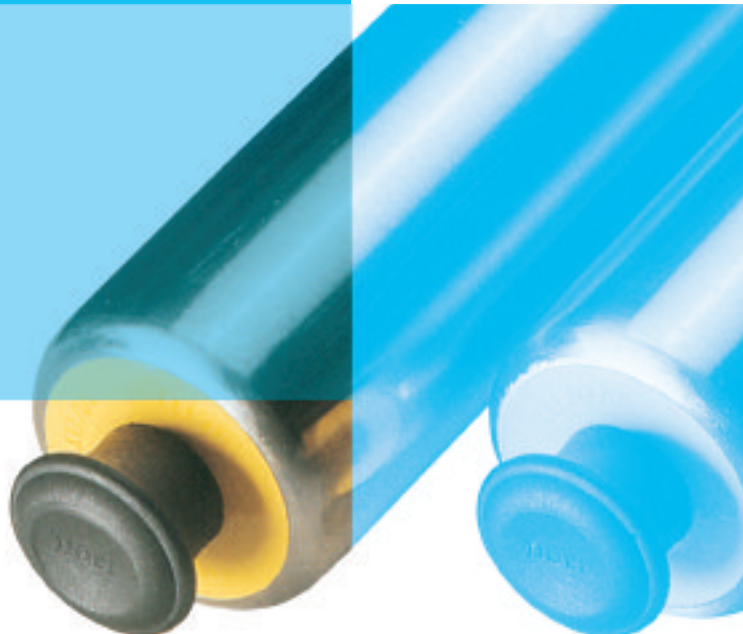



## Bedcruiken

De bedcruiken zijn uniek te noemen. Ze worden in de fabriek met een speciaal medium gevuld, waardoor ze ongeveer 8 uur lang een aangename warmte afgeven. De kruiken worden hermetisch afgesloten, zodat lekkage uitgesloten is.


Deze constructie biedt een lange levensduur en hoge mate aan gebruiksvriendelijkheid.

De indicatiesticker op de kruik geeft aan wanneer de kruik op temperatuur is.

## Specificaties vrijstaand model kruikenmoeders

| Aantal Kruiken | Zonder opbergruimte | H (mm) | Met opbergruimte | H (mm) |
|----------------|---------------------|--------|------------------|--------|
| 6              | KM-6V               | 475    | KM-6VO           | 820    |
| 9              | KM-9V               | 590    | KM-9VO           | 935    |
| 12             | KM-12V              | 705    | KM-12VO          | 1050   |
| 15             | KM-15V              | 820    | KM-15VO          | 1165   |
| 18             | KM-18V              | 935    | KM-18VO          | 1280   |

### Elektra aansluitwaarde:

240 Volt, 50 Hz, 1000 Watt + 

Afwijkende modellen op aanvraag

